




# Quick Start Guide italiano



Grafico di cottura  
Programmazione della fornace

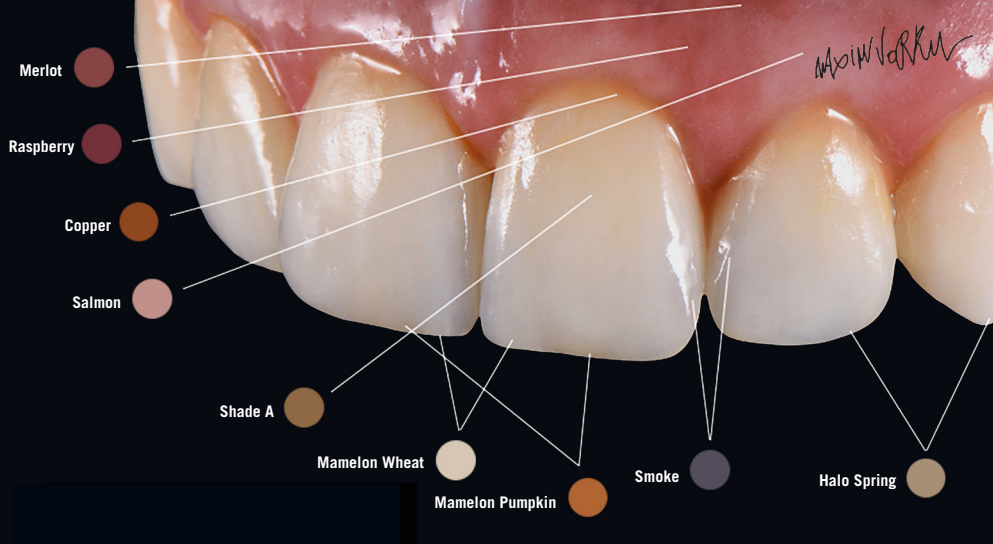

MiYO  
Workbook



## ESTETICA STRATIFICATA - COME PERSONALIZZARE UN MONOLITICO

MiYO è un sistema a base di paste ceramiche opalescenti, fluorescenti per colorare strutturare e glasare.

Con MiYO è possibile raggiungere dei risultati estetici in modo semplice e veloce, paragonabile a delle restaurazioni stratificate.

Il tempo dedicato equivale ad una colorazione.



### PREPARAZIONE

- Prima dell'applicazione delle masse la superficie deve essere pulita e deteresa.
- La superficie può essere sabbiata con 50 my di ossido di alluminio ad una pressione di 2 bar.

### ISTRUZIONI D'USO

- Non versare il liquido in eccedenza fuori dal contenitore.
- Mescolare accuratamente MiYO Color, MiYO Structure e glaze paste con una spatola non metallica.
- Le paste non devono venire a contatto con l'acqua.
- Usare sempre un pennello pulito ed asciutto.

### APPLICAZIONE

- Applicazione delle masse sulla superficie preparata secondo l'indicazione.

### STORAGE

- Conservare in ambiente secco tra +12°C e +38°C.



### PARAMETRI DI COTTURA\*

#### COLOR | STRUCTURE | GLAZE PASTE

#### HT STRUCTURE

|                             | ZrO <sub>2</sub> | InSync Zr | Litio-disilicato | Press to Zirkon | ZrO <sub>2</sub> | InSync Zr |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Temperatura iniziale [°C]   | 400 - 450        | 400 - 450 | 400 - 450        | 400 - 450       | 400 - 450        | 400 - 450 |
| Asciugatura [min]           | 3                | 3         | 3                | 3               | 3                | 3         |
| Tempo di chiusura [min]     | 4                | 4         | 4                | 4               | 4                | 4         |
| Incremento termico [°C/min] | 45               | 45        | 45               | 45              | 45               | 45        |
| Mantenimento 1 [s]          | 30 - 45          | 30 - 45   | 30 - 45          | 30 - 45         | 30 - 45          | 30 - 45   |
| Inizio vuoto [°C]           | 580              | 580       | 580              | 580             | 600              | 600       |
| Temperatura finale [°C]     | 720              | 720       | 710              | 720             | 775              | 775       |
| Fine vuoto [°C]             | 720              | 720       | 710              | 720             | 775              | 775       |
| Mantenimento 2 [s] **       | 30 - 60          | 30 - 60   | 30 - 60          | 30 - 60         | 60               | 60        |
| Tempo d'apertura [min]      | 1                | 1         | 1                | 1               | 1                | 1         |

\* I valori di cottura che seguono sono valori indicativi che possono variare secondo il tipo di forno.

\*\* In base al grado di lucentezza desiderato, il tempo di mantenimento è di 30 - 60 secondi.

Si prega di notare le informazioni sulla cottura e la programmazione del forno - Codice QR in prima pagina -